



# “ANGEL” “KOSAN” 泌尿器科用品カタログ

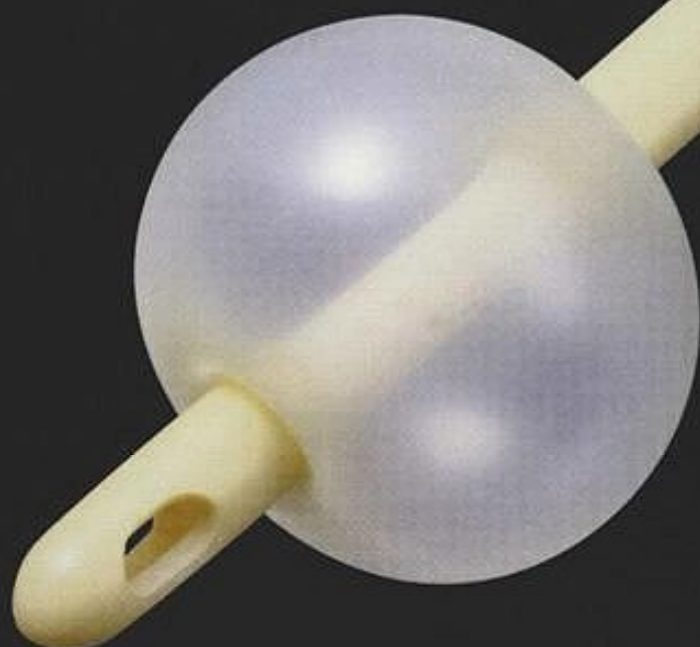

## カラーコード

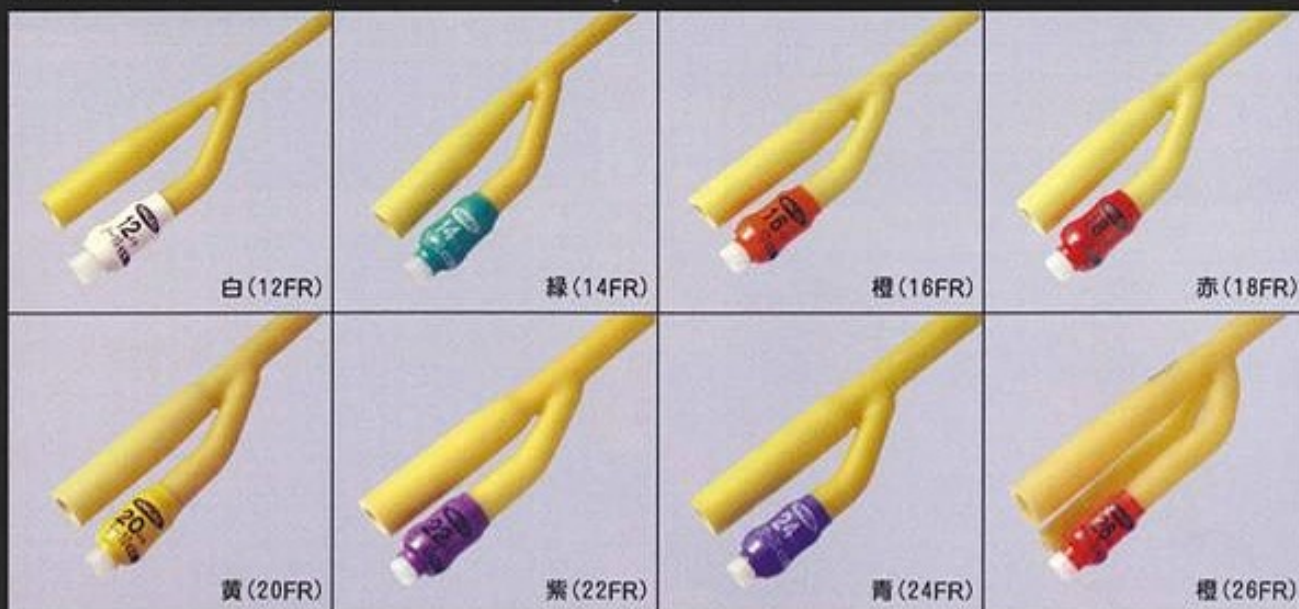


KOSAN CORPORATION

## “ANGEL” オールシリコン

### 2WAY バルーンカテーテル

“ANGEL” オールシリコン バルーンカテーテルは、数々の優れた特性を持っておりますが、中でも特に注目すべき点は、生体組織への刺激が非常に少なく、尿道粘膜の損傷や尿成分の付着がほとんど無いことです。その為、患者の苦痛を和らげ長期留置に最適です。

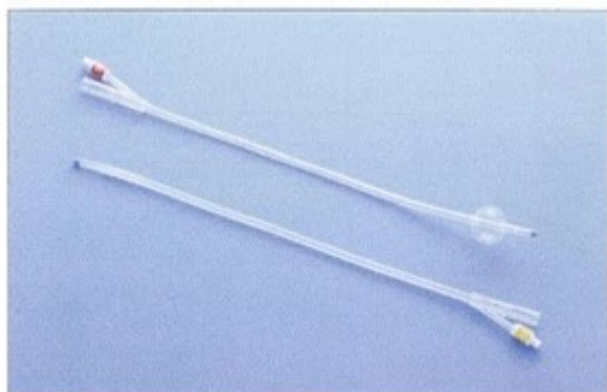

### 特長


- カテーテルが透明なので尿の状態を正確に素早くチェックでき、又 造影ライン入りですので体内での留置状態を正確に把握できます。
- 排尿ルーメンの内腔と側孔は、可能なかぎり広く・大きく設計され、しかもなめらかに仕上げられています。血尿もスムーズに排出され、長期留置にも良好な排尿が期待できます。

カラーコード	サイズ	バルーン容量		償還区分	全長
茶	6Fr	1.5mL		2管特定(Ⅱ)	33cm スタイル付
赤	8Fr	3mL			
黄	10Fr				
白	12Fr				
緑	14Fr	5mL	30mL	2管一般(Ⅱ)	42cm
茶	16Fr				
赤	18Fr				
黄	20Fr				
紫	22Fr				
青	24Fr				
茶	26Fr				

認証番号 220ADBZX00112000

## “ANGEL” オールシリコン

### 3WAY バルーンカテーテル

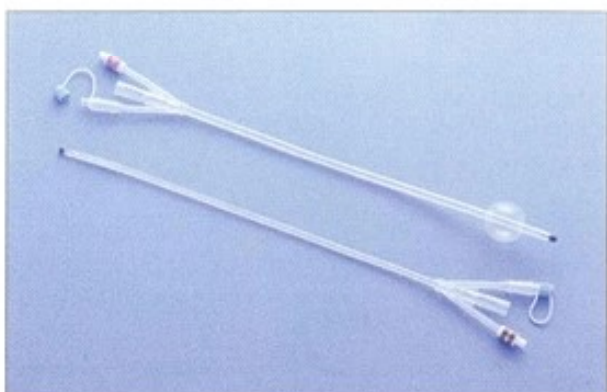

### 特長

- 注入用のパイプと排出用のパイプを持っているので、膀胱の持続的洗浄や膀胱内への薬液注入に最適です。
- 先端部には、洗浄液の流出口と排泄の流入口がバランス良く、それぞれ開口しているため理想的な洗浄効果が得られます。
- カテーテルが透明なので尿の状態を正確に素早くチェックでき、又 X線造影ライン入りですので、留置状態を正確に把握できます。

カラーコード	サイズ	バルーン容量	償還区分	全長
緑	14Fr	30mL	3管(Ⅱ)	42cm
茶	16Fr			
赤	18Fr			
黄	20Fr			
紫	22Fr			
青	24Fr			
緑	26Fr			

認証番号 220ADBZX00112000

## “ANGEL” 耐熱 ラテックス

### ロビンソンカテーテルA/ホールインチップカテーテル



承認番号 14500BZZ00342000

### 特長

- ファネル(接続部)がロート状になっているので、一般のコネクターに接続でき、使い易くなっております。
- 浸漬法によって、成型加硫されているため内外壁は平滑で、特に内径は均斉に加工されております。
- 天然ゴムラテックスを、新たに開発された耐熱配合により、優れた耐熱性を有する製品に仕上げました。配合薬品はF, D, A. 規格に照らし、安全衛生面に留意しておりますので重金属その他有害物質の溶出はありません。

品名	品名	備考
滅菌済み ロビンソンカテーテルA	横二ツ穴 # 3EG~#10EG	旧商品名
	横二ツ穴 #11EG~#15EG	ネラトンカテーテル
滅菌済み ホールインチップカテーテル	三ツ穴 # 3EG~#10EG	旧商品名
	三ツ穴 #11EG~#15EG	ネラトンカテーテル

サイズ 相 関 表														
EG	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Fr	7	9	10	12	13	15	16	18	19	21	22	24	25	

## ウエスタン シース

男性用 装着式採尿具



### 特長

- 極薄ラテックス製ですので、やわらかくフィットして使用感が極めて少なく、自然な状態で使用できます。
- 一体構造ですので、ねじれる事無く尿の排出をスムーズに行なえます。
- コネクターは広げやすく、どのつなぎ管にも直結できるので、接続が簡単です。
- 伸縮自在のスポンジ粘着テープは、調節可能で脱落/逆流を防止します。

サイズ		直径	包装形態
大人用	L	35cm	12個入り×5箱
中人用	M	30cm	
小人用	S	25cm	

## ユリナース (閉鎖式 精密計量尿バッグ)



- 計量カップは硬質プラスチックを使用しているため正確な尿の測定が出来ます。
- クローズドシステム及びドリップチャンバーの採用により、尿路感染の危険を防止出来ます。
- 尿サンプルを採取できる様、コネクターと計量カップにサンプル採取口を備えています。
- 裏面が白色になっているため、尿の色を観察できます。
- コンパクトに設計されており臭気も漏れません。

容量	軽量カップ200mL・バッグ2000mL
包装形態	10箱入り(カートン)



## ハルンバッグ (開口式尿袋)

尿・胃液・術後の廃液等チューブを使用して体液を貯留するすべての場合にご利用できます。透明で大きな目盛り付きの尿バッグは、チューブ挿入口が左右にありますのでベッドのどちら側からでも掛けることができます。更に、消臭タイプは、強力な消臭効果でバッグ内の尿の臭いを消します。

- 別売のハルンバッグ専用吊り金具と合わせてご使用下さい。
- 最小目盛り：25mL。

### ■“KOSAN” ハルンバッグ

- 3重にラミネートされたフィルムは、透明で縦／横どちらの方向に対しても大変丈夫です。また、尿量や色を正確に観察できます。
- 印刷は、2層目のフィルムに施されていますので、擦れたり薬液等により薄くなることはありません。

(消臭／未消臭)

容量	2500mL
包装	100枚入り／1袋×15袋

### ■“TNK” ハルンバッグ

- 従来品と変わらぬ信頼性を保証、強度的にも全く遜色ありません。

(消臭／未消臭)

容量	2500mL
包装	100枚入り／1袋×10袋



## ユーリンバッグ (架台式蓄尿袋)

●丈夫で透明な材質ですので、尿の量や色が正確に観察できます。更に消臭タイプは、強力な消臭効果でバッグ内の臭いは勿論、汚物室内の消臭も期待できます。

- ご用命により、蓋尿架台のご注文も承ります。
- 最小目盛り：50mL

### ■“KOSAN” ユーリンバッグ

- 氏名記入欄及び目盛り表示部分は読みやすいように白色に印刷してあります。
- 製造工程の複雑な部分は、熟練した技術者により一枚一枚丁寧に手作りされています。
- 100枚入りずつの〈箱入り〉と〈袋入り〉があります。

(消臭／未消臭)

容量	2500mL
包装	100枚入り／1袋×10袋


### ■“TNK” 消臭ユーリンバッグ

- 従来品と変わらぬ信頼性を保証、強度的にも全く遜色ありません。

(消臭のみ)

容量	2500mL
包装	100枚入り／1袋×10袋

## ハルンバッグ専用吊り金具

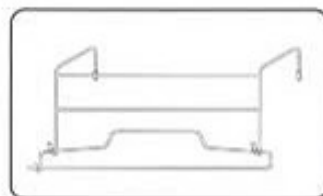

### 固定式吊り金具

- ベッド架の幅が固定されたスタンダードタイプです。

<ハンガー2本付き>



### ハンガーのみ

- ハルンバッグ専用吊り金具の、交換用ハンガーです。



## 小児用尿袋 (ユーリンコレクター)

張り付け型の小児用尿袋です。裏側のテープをはがして張り付けるだけで、しかも 滅菌済みですのでそのまま直ぐご使用になれます。

- 肌に刺激の少ない接着テープを使用しておりますので、安心してご使用になれます。
- 男児/女児兼用でご使用いただけるよう、卵形にカットされた採尿口は尿漏れを起こしにくくなっております。
- かぶれの少なさが大きな要因となり、医療現場より高い評価をいただいております。


容量	100 mL
包装	100 枚入り/1箱



## カテーテルバルブ (バルーンカテーテル用 開閉型 止め栓)

- バルーンカテーテル用の止め栓としてご使用下さい。
- 通常の止め栓と違い、活栓(スライドバルブ)になっておりますので、排尿の度にカテーテルから止め栓を抜かなくても容易に排尿が出来ます。
- ご使用方法は、可動(スライド)部分を押すだけの操作で開・閉が出来ますので、指先のご不自由な方でも簡単に排尿できます。


包装	50 個入り/1箱
----	-----------

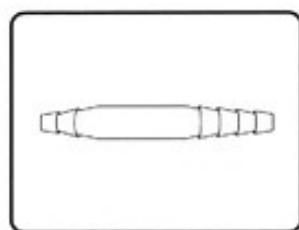

### 止め栓(滅菌済)

- 滅菌済みですので、そのまますぐご使用になれます。
- 先端を切り落とせば、つなぎ管としてもご使用になれます。

材質：半硬質ポリエチレン

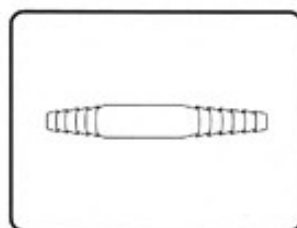


### つなぎ管(未滅菌)

- チューブやカテーテルとの接続にご使用ください。

材質：硬質ポリエチレン

## 《2WAYバルーンカテーテルの構造と名称》

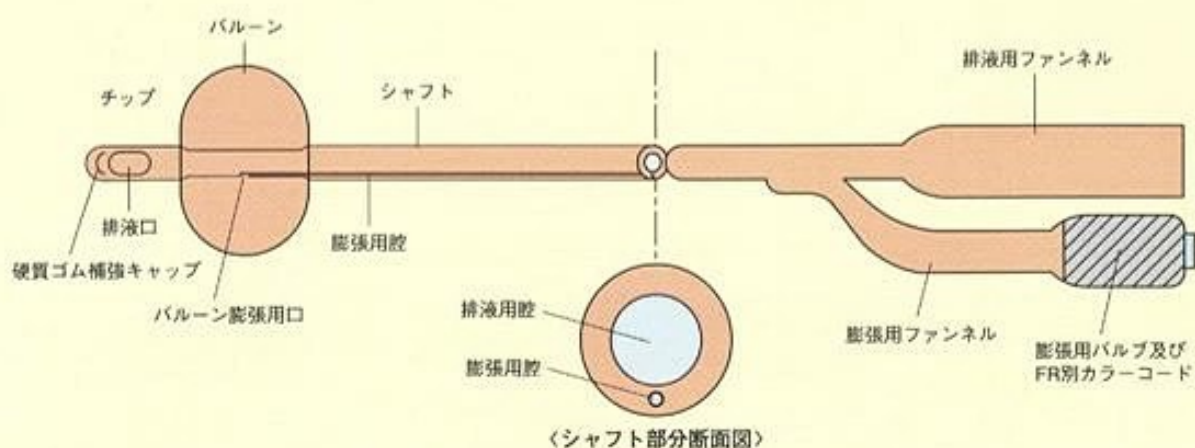

**恒産商事株式会社**  
KOSAN CORPORATION

本 社 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里6-11-7  
TEL. 03(3800)4631 FAX. 03(3800)6371  
大阪営業所 〒530-0043 大阪市北区天満3-9-15  
TEL. 06(6352)6991 FAX. 06(6352)6944

●取扱店